

SVM-7160

Moderne Spot Check-Messung der Vitaldaten

Mit dem neuen Spot Check-Monitor werden periphere Stationen in Kliniken wie auch Arztpraxen mit neuester Technologie zur Messung der Vitalparameter unterstützt. Für Spitler mit Nihon Kohden Patientenmonitoring besteht die Mglichkeit, das Gert im Netzwerk (LAN/WLAN) zu integrieren und die Patienten an der berwachungszentrale anzuzeigen.





Modifizierter Early Warning Score

Wenn eine grosse Patientenzahl mit berschaubarem Personal versorgt werden muss, kann es passieren, dass eine Verschlechterung der Vitalparameter nicht rechtzeitig erkannt wird.

Mit einem Modifizierten Early Warning Score (MEWS) knnen klinische Vernderungen des Patientenzustandes frhzeitig erkannt werden, um dann rechtzeitig die richtigen therapeutischen Massnahmen zu ergreifen.

Illustrierte Bildschirmanleitungen fr akkurate Ergebnisse

Fr eine richtige Durchfhrung der Messungen folgen Sie einfach den Bildschirmanleitungen.

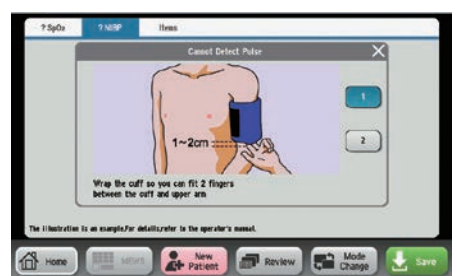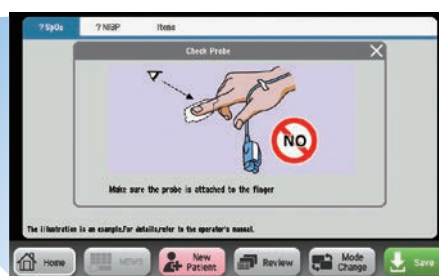

Merkmale

- > Parameter: iNIBP, SpO₂ (Nihon Kohden oder Masimo), Temperatur
- > iNIBP (Messung des Blutdrucks whrend des Aufpumpvorgangs und stoppt nach Erreichen der Systole)
- > Whlbar Spot-Messung oder kontinuierliche berwachung mittels Alarmgrenzen
- > Early Warning Score mit flexibler Konfiguration des Charts
- > Manuelle Eingabe weiterer Parameter (E-charting) wie Atemfrequenz, Blutzuckerspiegel, Medikation usw.
- > Illustrierte Bildschirmanleitungen fr akkurate Ergebnisse
- > Integrierte LAN-Schnittstelle
- > 8" Touchscreen-Bildschirm, 2.1 kg und bis zu 6 Stunden Akkulaufzeit
- > Abmessung 232 × 246 × 135 mm